


küken®
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

MANUAL

DEL USUARIO
INSTRUÇÕES DE USO

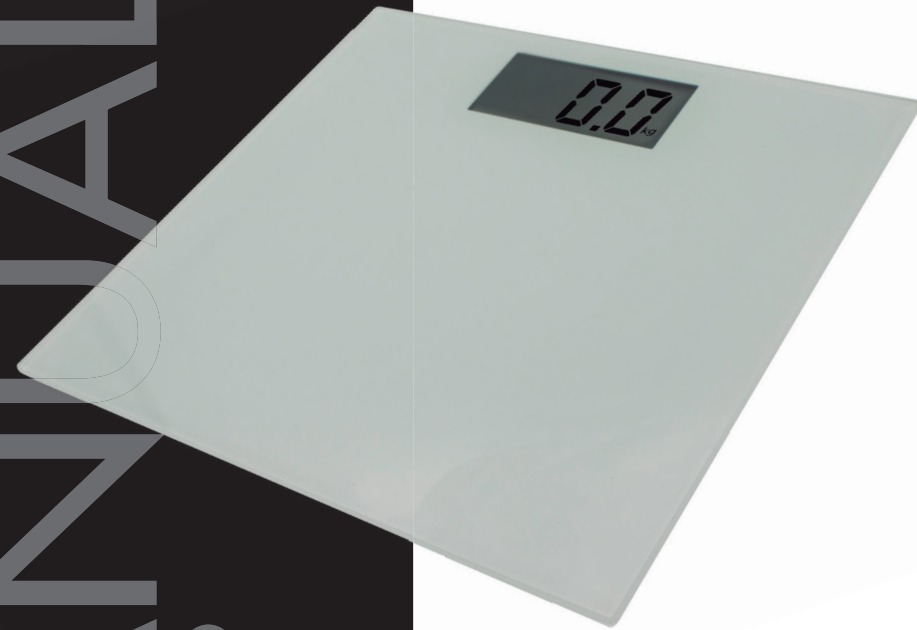


180KG
32x30CM

NÚMEROS GRANDES
PANTALLA LED
CRISTAL TEMPLADO

küken®
DISTRIBUIDO POR ALFA DYSER

Alfa Dyser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635. Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España · B-60163441
T. 937831011 · F. 937838487
www.alfadyser.com ·
alfa@alfadyser.com

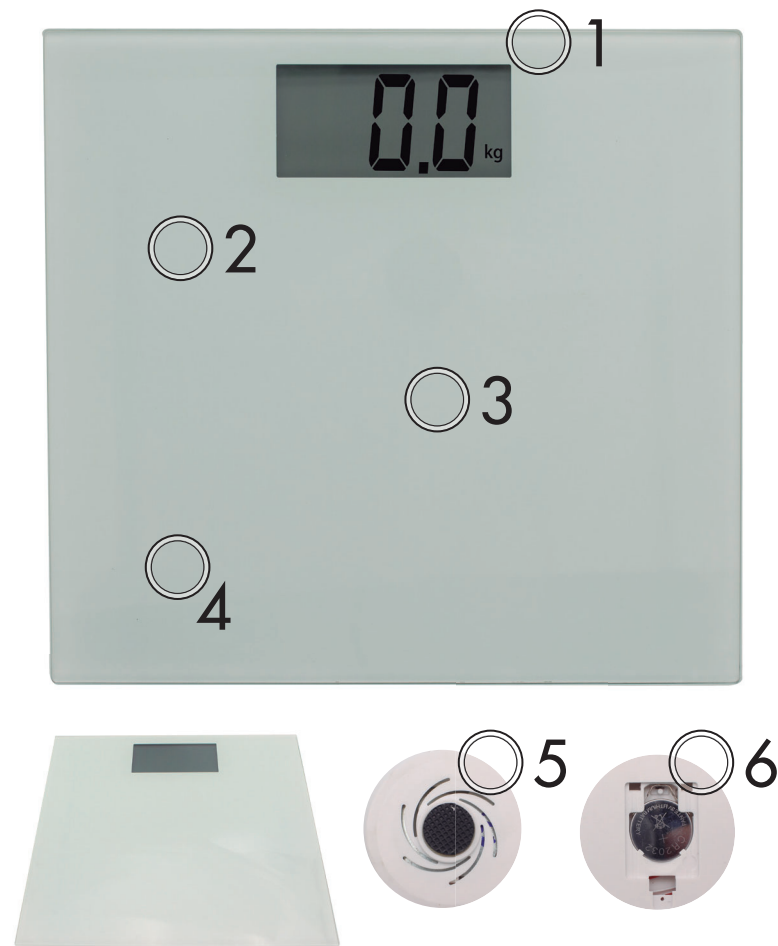

1. PANTALLA LED NÚMEROS GRANDES
2. PUNTO DE APOYO SUPERIOR
3. BASE DE CRISTAL DE 2,5CM.
4. PUNTO DE APOYO INFERIOR
5. PATAS ENGOMADAS
6. COMPARTIMENTO PILAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Sensor de alta precisión
2. Peso máximo: 180Kg.
3. Unidades de peso: Kg / lb/st: lb
4. Pantalla LED ø 73mm con luz azul.
5. Numeros grandes
6. Encendido y apagado automático.
7. Indicación de nivel de batería (pilas)
8. Peso mínimo 3 Kg.


COLOCACIÓN DE LAS PILAS EN EL COMPARTIMENTO

La báscula utiliza 1 pilas CR2032. En la parte trasera de la báscula está el compartimento de las pilas. Abra la tapa, inserte la pila en la posición tal y como se indica, cierre la tapa y vuelva a colocar la báscula en una base recta.

FUNCIONAMIENTO

Paso1: usa la báscula en una superficie plana y firme. No la coloque sobre una superficie mojada.

Paso2: Súbase sobre la báscula, el encendido es automático. La báscula se encenderá e indicará su peso, pasapadeará tres veces y se parará. Una vez se baje de la báscula, esta se apagará automáticamente pasados 10 segundos.

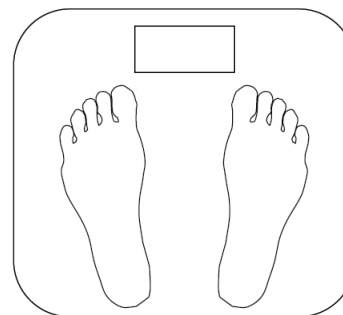

CAMBIAR DE KG / LB / ST:LB

Para cambiar la unidad de medida, en la parte trasera de la báscula, abra la tapa del compartimento de las pilas y en la parte superior encontrará un pequeño botón que cambia la unidad de medida al pulsarlo.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Limpie su báscula de baño con un trapo húmedo. No introduzca la báscula en agua. No use productos químicos ni detergentes para su limpieza. Nunca sumerja la báscula dentro de agua u otros líquidos. No suba nunca a la plataforma con las pies húmedos ya que podría resvalar por la superficie de cristal. No guarde la báscula en posición vertical cuando no esté en uso; Esto puede agotar la batería. Evite agitar, dejar caer la báscula. Este es un instrumento de precisión y debe ser manejado con cuidado. Nunca intente reparar la báscula, llévelo a un centro especializado o llame al distribuidor oficial.

Cuando la báscula no esté en uso por un largo periodo de tiempo, quite las pilas del compartimento para no agotarlas. Cuando la báscula esté apagada, nunca coloque objetos sobre la plataforma. Siempre coloque y guarde el producto lejos de fuentes de calor, luz solar, humedad y objetos punzantes.

EN CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Por favor, chequee si la batería ha sido colocada en el compartimento con la polaridad correcta.
Por favor chequee si tiene seleccionada la unidad de peso.
Por favor chequee que la báscula esté colocada en una posición estable.
Asegúrese que ha esperado a que ponga 0.0 antes de subirse a la báscula.

CÓDIGOS DE ERROR

1. **Lo**

Cuando la pantalla LCD indica "Lo", por favor abre la tapa del compartimento de las baterías y reemplazala por otras baterías.

2. **Err**

Cuando la capacidad máxima excede de 180kg. aparecerá en la pantalla "Err".



PRECAUCIONES


Use este producto solo para el propósito que se describe en las instrucciones. Esta báscula es de uso doméstico, cualquier otro uso puede ser considerado como peligroso y podría dañar su báscula.

Los componentes de la caja, así como bolsas de plástico, cartón... deberán ser retiradas ya que podrían ser peligrosos para los niños. Esta escala no debe usarse para pesar sustancias químicas, comerciales, o cualquiera de un tipo similar determinados por peso.

Con el fin de evitar el peligro para el usuario de este dispositivo, no se usará para pesar las dosis de cualquier fármaco o la terapia prescrita por su propio médico, no debe en ningún caso ser modificada sobre la base de datos calculados por este dispositivo.

Nota: para evitar posibles lesiones, no pise el borde de la plataforma.

NORMATIVA DE RECICLAJE

	<p>INFORMACIÓN A LOS USUARIOS Según las Directivas Europeas 2002/96/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centros de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrotécnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.</p>
---	---

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Sensor de alta precisão
2. Peso máximo: 180Kg.
3. Unidades de peso: Kg / lb/st: lb
4. Ecrã LED ø 73mm com luz azul.
5. Números grandes
6. Liga e desliga automaticamente.
7. Indicação de nível de bateria (pilhas)
8. Peso mínimo 3 Kg.


COLOCAÇÃO DE PILHAS NO COMPARTIMENTO

A balança utiliza CR2023. O compartimento para a pilha está situado na parte traseira da balança. Abra a tampa, insira as pilhas na posição indicada, feche a tampa e volte a colocar a balança numa superfície plana.

FUNCIONAMENTO

Passo 1: utilize a balança em superfícies planas e firmes. Não coloque a balança sobre superfícies molhadas.

Passo 2: Suba à balança para que esta se ligue automaticamente. A balança ligar-se-á e indicará o seu peso, piscará três vezes e parará. Depois de sair da balança esta desligar-se-á passados 10 segundos.

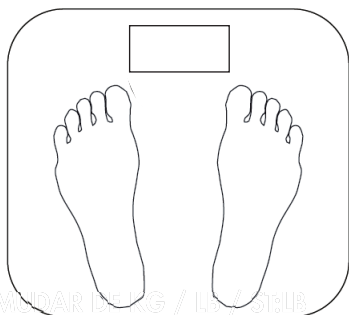

Para alterar a unidade de medida, abra a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira da balança, e aí encontrará um pequeno botão que muda a medida ao ser pressionado.

MANUTENÇÃO E CUIDADO

Limpe a sua balança com um pano húmido. Jamais submerja a balança em

água ou em qualquer outro líquido. Não utilize produtos químicos nem detergentes para a sua limpeza.

Jamais suba para a balança com os pés húmidos já que pode resvalar na superfície de vidro.

Não guarde a balança em posição vertical pois pode gastar a pilha.

Evite agitar ou deixar cair a balança. Este é um instrumento de precisão e deve ser manejado com cuidado.

Jamais tente reparar a balança. Caso necessite de reparação, leve-a a um centro especializado ou contacte o distribuidor oficial.

Quando a balança não estiver em utilização por um tempo grande período de tempo, retire as pilhas para que não se gastem.

Quando a balança estiver desligada, não coloque objetos sobre a plataforma. Guarde a sua balança longe de fontes de calor, luz solar, humidade e objetos pontiagudos.

EM CASO DE PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO

Por favor, verifique se as pilhas estão bem colocadas.

Por favor, verifique se já tem a unidade de peso desejada selecionada.

Por favor, verifique que a balança está colocada numa posição estável.

Assegure-se que o ecrã mostra 0.0 antes de subir à balança.

CÓDIGOS DE ERRO

1. LO

Quando o ecrã LCD indica "Lo", por favor abra a tampa do compartimento das pilhas e substitua-as.

2. Err

Quando a capacidade máxima é ultrapassada (180Kg) aparecerá no ecrã a expressão "Err".



PRECAUÇÕES

Utilize este produto somente para o propósito para que foi concebido. Esta balança é para uso doméstico, qualquer outra utilização pode ser

